


Frühstücksbrett / Schneidebrett

ⓁⒺ **Gebrauchsanweisung** – Frühstücksbrett / Schneidebrett

ⓁⒺ **Instructions for Use** – Breakfast Board / Cutting Board

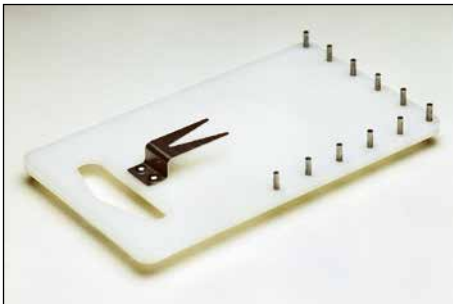

CE


Thomashilfen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für unser Produkt entschieden und wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Damit die Handhabung Ihres neuen Produktes für Sie und den Nutzer sicher, praktisch und komfortabel ist, lesen Sie bitte zuerst diese Gebrauchsanweisung. So können Sie Beschädigungen und Bedienungsfehler vermeiden. Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Gebrauchsanweisung beim Produkt verbleibt und jedem Nutzer zur Verfügung steht.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhandel oder direkt an uns.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde


Telefon: +49 (0) 4761 8860 · www.thomashilfen.de

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Das kann zu Abweichungen zwischen Ihrem Produkt und der Darstellung in Medien führen.

Kennzeichnung	Bedeutung
	<p>Barcode-Label</p> <p>Position am Produkt (Verpackung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hersteller - Produktname - Produktgruppe - Artikelnummer kurz / lang - MD = Medizinprodukt - Herstellungsdatum - Seriennummer



9800800420000

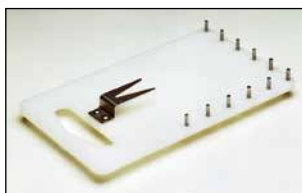

9800803580000



9800800360000

Hinweise

- Lesen Sie sich vor Erstgebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch oder lassen Sie sich diese bei Leseschwierigkeiten vorlesen. Sollte die Gebrauchsanweisung fehlen, können Sie sich diese auf www.thomashilfen.de herunterladen. Die Inhalte der digitalen Gebrauchsanweisung können vergrößert dargestellt werden.
- Prüfen Sie die Verpackung auf Transportschäden und ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterial und Kleinteile nicht in die Hände von Kindern gelangen können, um ein Verschlucken bzw. die Gefahr des Erstickens zu vermeiden.
- Veränderungen am Produkt sind nur im Rahmen der vorgesehenen Einstellmöglichkeiten zulässig.
- Reinigung und Pflege im Alltag kann von Angehörigen und Betreuern durchgeführt werden.
- Sollte es wider Erwarten zu einem schwerwiegenden Vorfall mit dem Produkt kommen, melden Sie dies bitte unverzüglich unserem Unternehmen und der zuständigen Behörde.

Produktbeschreibung

Lieferumfang


Ihr Produkt wird in der Grundausstattung vormontiert geliefert. Dem Produkt liegt eine Gebrauchsanweisung bei. 9800800420000: Die Schraubzwinde liegt bei.

Grundausstattung

Kunststoffbrett; 4 Saugnäpfe; Dorne;

zusätzlich bei 9800800420000 und 9800803580000: Gabelhalterung;

zusätzlich bei 9800800420000: Schraubzwinde

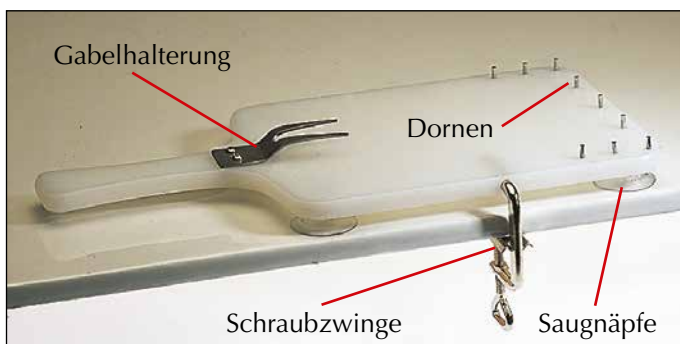

Gebrauchsschulung

Der Anwender wird vom autorisierten Fachpersonal unter Hinzunahme dieser Gebrauchsanweisung in den Gebrauch dieses Hilfsmittels eingewiesen.

Einstellmöglichkeiten / Leistungsmerkmale

Durch festes Andrücken der vier Saugnäpfe wird das Brett fixiert, um das Verrutschen des Brettes auf glattem Untergrund zu verhindern.

Die rostfreien Dornen am Rand des Frühstücksbretts / Schneidebretts halten das Brot und andere Speisen sicher auf dem Brett.

Nur 9800800420000 und 9800803580000: Mit der fest montierten Gabel können Wurst, Käse o.ä. fixiert werden, um sie auch einhändig schneiden zu können.

Nur 9800800420000: Zusätzlich sollte das Frühstücksbrett – wenn möglich – mit der beiliegenden Schraubzwinde fixiert werden. Dazu den Metallstift in das seitliche Loch am Brett einführen und das Brett an der Tischkante festschrauben.

Technische Daten

Frühstücksbrett (Art. 9800800420000)

Größe (L x B)	38 x 18 cm
Gewicht	610 g

Schneidebrett (Art. 9800803580000)

Größe (L x B)	15 x 25 cm
Gewicht	291 g

Schneidebrett (Art. 9800800360000)

Größe (L x B)	16 x 16 cm
Gewicht	315 g

Materialangaben

Kunststoff; Edelstahl

Reinigung und Instandhaltung

Das Produkt kann mit handelsüblichen Geschirrspülmitteln oder in handelsüblichen Geschirrspülern bis 60 °C gereinigt werden.

Lagerung

Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht genutzt wird. Stellen und legen Sie während der Lagerung keine schweren Objekte auf das Produkt. Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen wie Regen, starker Sonneneinstrahlung und Frost. Sollte das Produkt nass sein, wischen Sie Metall- und Kunststoffteile trocken, bevor Sie das Produkt einlagern.

Entsorgung

Ist das Produkt aufgrund seines Zustandes nicht mehr verwendungsfähig oder hat das Ende der Lebensdauer erreicht, kann es beim örtlich zuständigen Entsorgungsunternehmen recycelt werden. Bitte beachten Sie hierbei die vor Ort geltenden Bestimmungen zu Recycling und Entsorgung.

Gewährleistung

Thomashilfen bietet Ihnen für dieses Produkt die zweijährige gesetzliche Gewährleistung. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. Die Gewährleistung umfasst alle Ansprüche, die die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Überbelastung), sowie natürlichen Verschleiß entstehen.

Nutzungsdauer

Das Produkt hat eine Nutzungsdauer von bis zu 6 Jahren bei fachgerechter und regelmäßiger Wartung auf Grundlage der Herstellerangaben. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren und technisch einwandfreien Zustand befindet. Zeiten der Einlagerung beim Fachhandel sind von der Nutzungsdauer ausgenommen.

Die theoretische Nutzungsdauer ist keine garantierte Nutzungsdauer. Sie ist abhängig von der Nutzungsintensität und unterliegt immer einer Einzelfallprüfung durch den Fachhandel.

Lebensdauer

Das Produkt hat eine Lebensdauer von 8 Jahren, wenn die bei der Nutzungsdauer angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Lebensdauer setzt sich zusammen aus der Nutzungsdauer und Lagerungszeiten.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet.

Nur 980080042000 Frühstücksbrett:

Zweckbestimmung

Bestimmungsgemäße Verwendung / Anwendungsbereiche

Das Frühstücksbrett ist ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Die Alltagshilfe ermöglicht dem Nutzer das selbständige Zubereiten und Schneiden von Lebensmitteln. Die Positionierungshilfen verhindern das Verrutschen der Lebensmittel vom Brett.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Indikation / Patientenzielgruppe, vorgesehene Anwender

Das Produkt eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit motorischen Beeinträchtigungen in Hand und / oder Fingern. Außerdem geeignet bei Einhändigkeit.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Bei sachgerechtem Gebrauch können Risiken bei der Anwendung ausgeschlossen werden. Kontraindikationen sind nicht bekannt.

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, ggf. Varianten und Zubehör mit den grundlegenden Bestimmungen übereinstimmt. Eine aktuelle EU-Konformitätserklärung kann im Internet auf www.thomashilfen.de heruntergeladen oder direkt bei uns angefordert werden.

Dear Customer,

Thank you for choosing our product and for the trust you have placed in us. In order for you and the user to enjoy your new product safely, conveniently, and comfortably, we kindly ask that you read the Instructions for Use. Doing this will also help avoid damage, injury, and incorrect operation and handling of the product. Please ensure that a copy of the Instructions for Use remains with the product so that every user has access to it.

If you have any questions, please contact your authorised distributor or us directly.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany


Phone: +49 (0) 4761 8860 · www.thomashilfen.de

We reserve the right to make technical changes. This can lead to differences between your product and how it is presented in brochures and other media.

Label	Meaning
	<p>Barcode Label</p> <p>Position on the Product (Packing)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manufacturer - Product Name - Product Group - Item Number short / long - MD = Medical Device - Manufacture Date - Serial Number



9800800420000

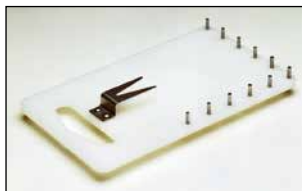

9800803580000



9800800360000

Remarks

- Read the Instructions for Use carefully before first use. If you have difficulty reading, please have them read to you. If the copy of the Instructions for Use is missing, you can download one from www.thomashilfen.de. The contents of the digital Instructions for Use can be enlarged.
- Check the packaging for any transport damage and to be sure the product is in flawless condition.
- Keep the packaging material and small parts out of the reach of children to prevent swallowing or choking.
- Changes to the product are only permitted within the scope of the intended adjustment options.
- Cleaning and daily care can be provided by relatives and caregivers.
- If there is a serious and unexpected accident with the product, please inform our company immediately and the responsible authorities.


Product Description

Scope of Delivery

Your product is delivered with the standard equipment and comes preassembled. A copy of the Instructions for Use is enclosed with the product.
Only 9800800420000: The screw clamp is enclosed.

Standard Equipment

Plastic board; 4 suction cups; mandrels;
additionally at 9800800420000 and 9800803580000: fork holder;
additionally at 9800800420000: screw clamp

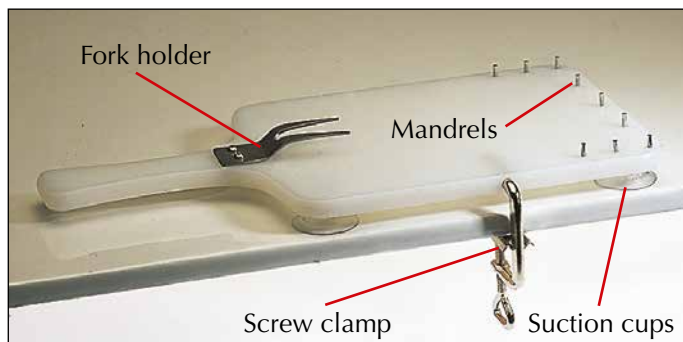

Teaching the User

The user is taught how to use this device by trained staff who will reference these Instructions for Use.

Adjustment Options / Features

The board is fixed in place by pressing firmly on the four suction cups to prevent it from slipping on a smooth surface.

The stainless steel spikes on the edge of the breakfast board / cutting board hold the bread and other food securely on the board.

Only 9800800420000 and 9800803580000: The firmly mounted fork can be used to fix sausage, cheese or the like so that they can also be cut with one hand.

Only 9800800420000: In addition, the breakfast board should - if possible - be fixed with the enclosed screw clamp. To do this, insert the metal pin into the hole on the side of the board and screw the board to the edge of the table.

Technical Data

Breakfast Board (Item 9800800420000)

Size (l x w)	38 x 18 cm / 15 x 7.1"
Weight	610 g / 1.3 lbs

Cutting Board (Item 9800803580000)

Size (l x w)	15 x 25 cm / 5.9 x 9.8"
Weight	291 g / 0.64 lbs

Cutting Board (Item 9800800360000)

Size (l x w)	16 x 16 cm / 6.3 x 6.3"
Weight	315 g / 0.69 lbs

Material Specifications

Plastic; Stainless steel

Cleaning and Maintenance

The product can be cleaned with standard dishwashing detergents or in standard dishwashers up to 60 °C.

Storage

Store the product in a safe place when it is not being used. Do not lay or put any heavy objects on the product while it is being stored. Protect the product from weather like rain, intense sunlight, and frost. If the product is wet, wipe the metal and plastic parts dry before storing the product.

Disposal

If the product is no longer usable due to its condition or it has reached the end of its service life, it can be recycled at the local waste disposal company. Please refer to the local guidelines for recycling and disposal.

Warranty

Thomashilfen offers you the two-year warranty as required by law for this product. The warranty period starts when the item is handed over. The warranty includes all claims which impact function. Not included is damage which is the result of improper use (e.g. overloading) and natural wear and tear.

Period of Use

The product has a period of use of up to 6 years if used correctly and serviced regularly by a professional as per the information from the manufacturer. The product can be used beyond this point if it is in safe and technically sound condition. Time spent in storage at the distributor does not count towards the period of use.

The theoretical period of use does not equate to a guaranteed service life. It depends on the intensity of use and always undergoes an individual assessment by the distributor.

Service Life

The product has a service life of 8 years if the requirements stipulated for the period of use are met. The service life consists of the period of use and the storage times.

Reuse

The product is not suitable for reuse.

Only 9800800420000 Breakfast Board:

Intended Purpose

Intended Use / Application Areas

The breakfast board is a class 1 medical device.

The everyday aid enables the user to prepare and cut food independently. The positioning aids prevent the food from slipping off the board.

Any use that goes above and beyond this does not comply with the intended use.

Indication / Patient Target Group / Intended Users

The product is suitable for children, adolescents and adults with motor impairments in hand and / or fingers. Also suitable in case of one-handedness.

Risks Associated with Use and Contraindications

If used properly, risks can be eliminated during use. There are no known contraindications.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare as the party solely responsible that this product and any versions and accessories comply with the basic regulations. The current EU Declaration of Conformity can be downloaded at www.thomashilfen.de or requested from us directly.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de